


11.15.10

L01-429 Rev. A

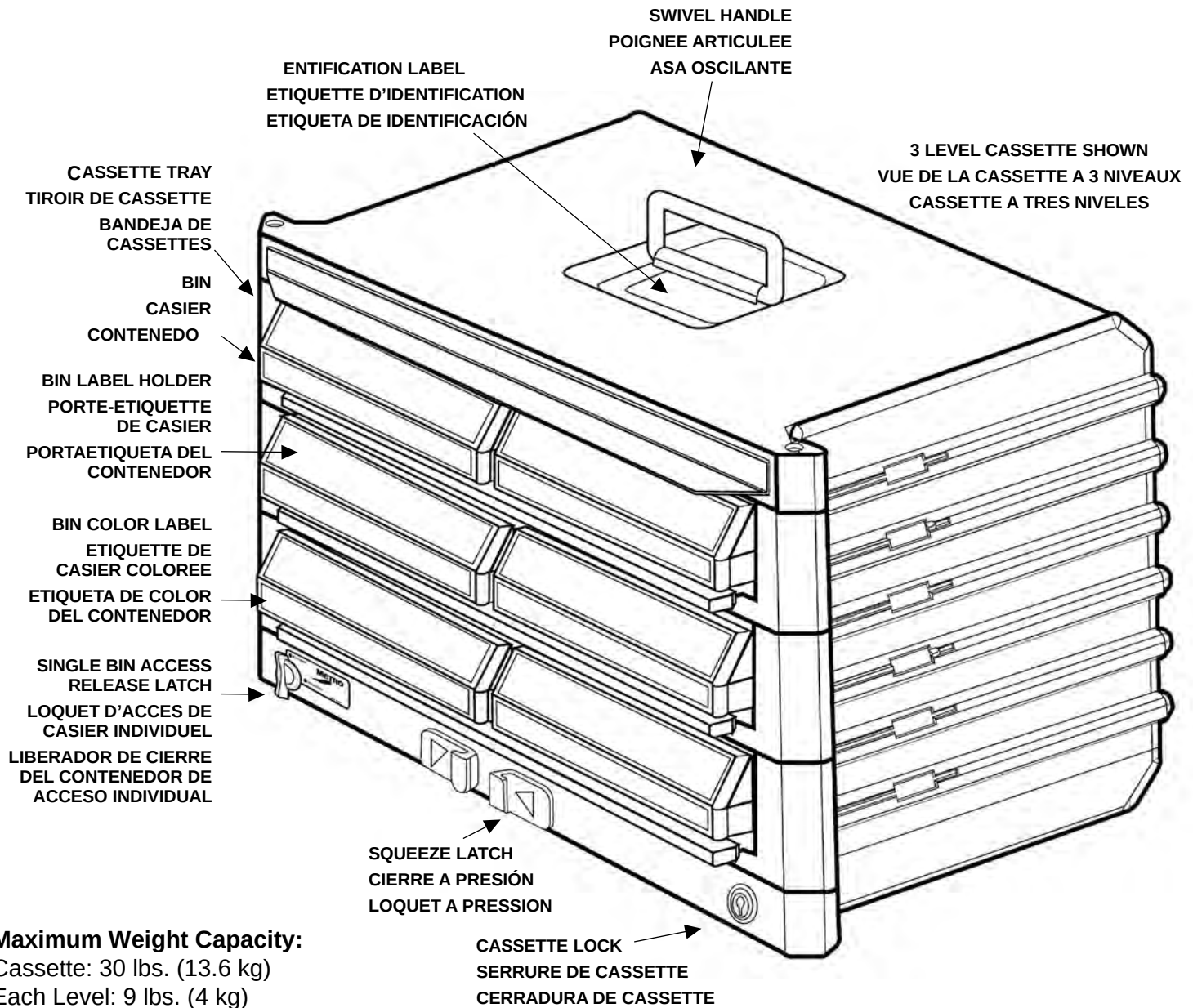

Maximum Weight Capacity:

Cassette: 30 lbs. (13.6 kg)
Each Level: 9 lbs. (4 kg)

Poids maximum:

Cassette: 13.6 kg
Niveau individuel: 4 kg

Capacidad máxima en peso:

Cassette: 30 lbs (13,6 kg)
Cada nivel: 9 lbs (4 kg)


Replacement Parts on Page 3
Cleaning Instructions on Page 4

Pieces de Rechange en Page 3
Instructions de Nettoyage en Page 4


Piezas de repuesto en la Página 3
Instrucciones de limpieza en la Página 4




TO REMOVE CASSETTE FROM CART
POUR EXTRAIRE LA CASSETTE DU CADDIE
PARA SACAR LA CASSETTE DEL CARRO

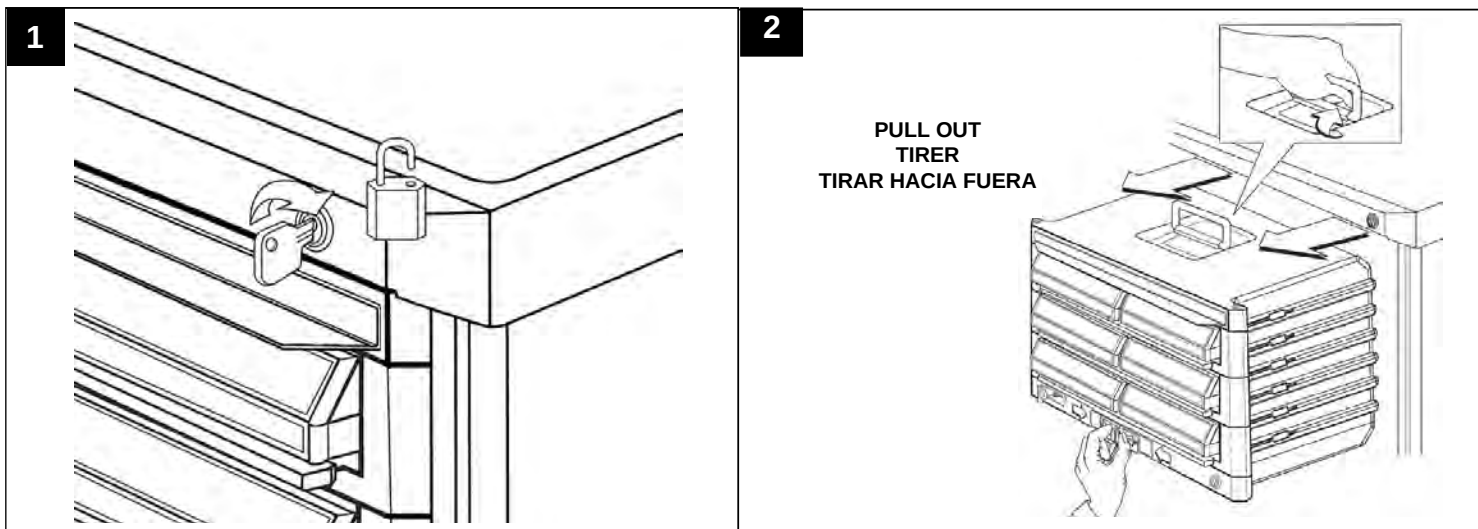

TO ACCESS OR REMOVE CASSETTE BINS
POUR ACCEDER ET EXTRAIRE LES CASIERS DE CASSETTE
PARA TENER ACCESO O SACAR LOS CONTENEDORES DE LA CASSETTE

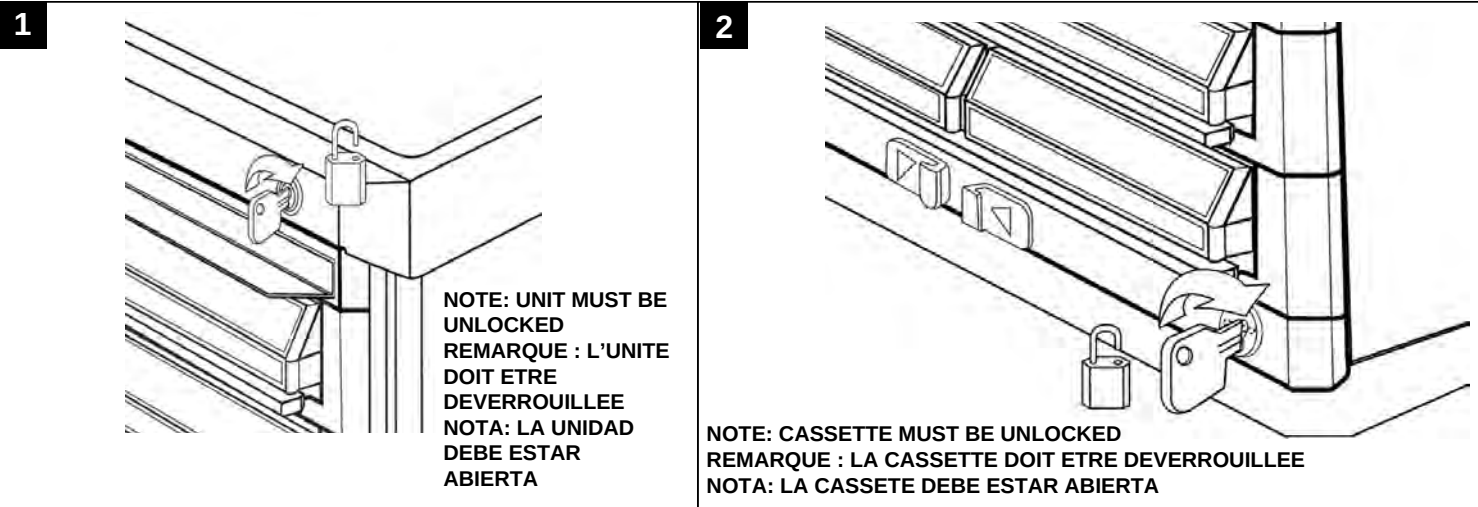

FULL LEVEL ACCESS
ACCESS RANGEE COMPLETE
ACCESO AL NIVEL COMPLETO

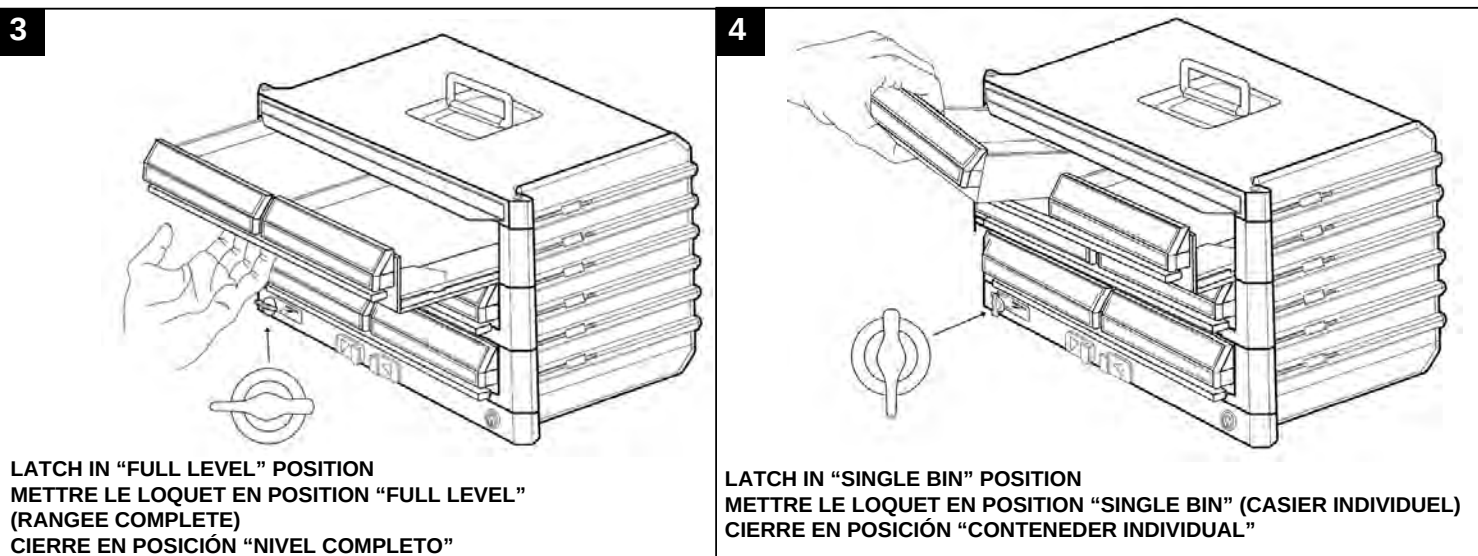

Cassette Body


Item	Description	Qty.	Part No.
A	Cassette ID Label	50 Pack	RPCASID-50
B	Latch Spring	1	RPC10-016
C	Latch with Screw	1	RPCAS-LTCH
D	Lock & Cam Assy.	1	RPCAS-LOCK
E	SBA Latch & Cam	1	RPCAS-SBALK
L	Cassette Tray	1	RPSXR-1020

Armature de la cassette

Élément	Description	Qté	Pièce n°
A	Étiquette de cassette	Paquet de 50	RPCASID-50
B	Ressort de loquet	1	RPC10-016
C	Loquet à vis	1	RPCAS-LTCH
D	Bloc serrure et came	1	RPCAS-LOCK
E	Loquet/came casier indiv.	1	RPCAS-SBALK
L	Tiroir de Cassette	1	RPSXR-1020

Cuerpo de la cassette


Artículo	Descripción	Cant.	Pieza No
A	Etiqueta de identificación de la cassette	Paquet de 50	RPCASID-50
B	Resorte del cierre	1	RPC10-016
C	Cierre con tornillo	1	RPCAS-LTCH
D	Conjunto de cerradura y leva	1	RPCAS-LOCK
E	SBA cierre y leva	1	RPCAS-SBALK
L	Bandeja de cassette	1	RPSXR-1020

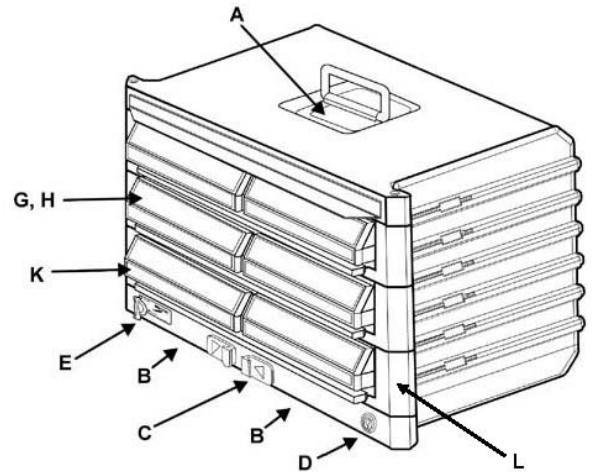

Cassette Bins

Item	Description	Qty.	Part No.
F	3" SGL Access Bin	1	SXRBINSB3
	4 1/2" SGL Access Bin	1	SXRBINSB4
	6" SGL Access Bin	1	SXRBINSB6
	8" SGL Access Bin	1	SXRBINSB8
G	3" Label Holder	10 Pack	RPR3LABHLDR-10
	4 1/2" Label Holder	10 Pack	RPR4LABHLDR-10
	6" Label Holder	10 Pack	RPR6LABHLDR-10
	8" Label Holder	10 Pack	RPR8LABHLDR-10
H	3" Bin Card	50 Pack	RP3CARD-50
	4 1/2" Bin Card	50 Pack	RP4CARD-50
	6" Bin Card	50 Pack	RP6CARD-50
	8" Bin Card	50 Pack	RP8CARD-50
I	3", 4 1/2", 6" Bin Divider Kit	20 Dividers & 4 Pair Slotted Holders	SXCASSDIV
	8" Bin Divider Kit	8 Dividers & 4 Pair Slotted Holders	SXBIN8DVR
J	3", 4 1/2", 6" Bin Divider Card	50 Pack	RPDIVCARD-50
K	Cassette Label Kit*	See Below	SXCASLABEL

* Cassette Label Kit includes: (18) 3", 4 1/2", 6" & 8" Bin Cards; 2 Sheets bin labels (1-18/sheet 3", 4 1/2" & 6" bins; 1-33/sheet for 8" bins) in each color & 4 Cassette ID Labels.

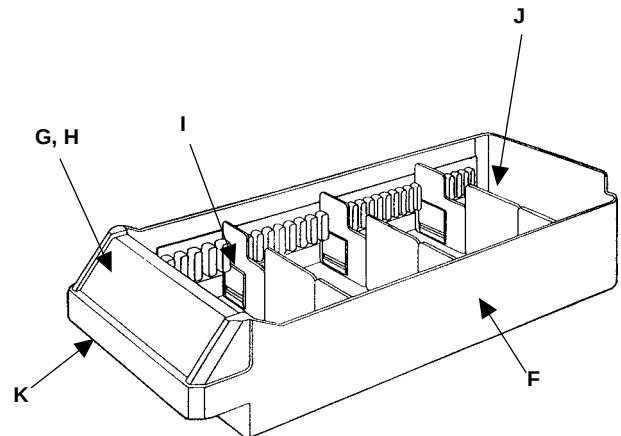

Tiroirs

Élément	Description	Qté	Pièce n°
F	Tiroir individuel de 7,6 cm	1	SXRBINSB3
	Tiroir individuel de 11,4 cm	1	SXRBINSB4
	Tiroir individuel de 15,2 cm	1	SXRBINSB6
	Tiroir individuel de 34,6 cm	1	SXRBINSB8
G	Porte-étiquette de 7,6 cm	Paquet de 10	RPR3LABHLDR-10
	Porte-étiquette de 11,4 cm	Paquet de 10	RPR4LABHLDR-10
	Porte-étiquette de 15,2 cm	Paquet de 10	RPR6LABHLDR-10
	Porte-étiquette de 34,6 cm	Paquet de 10	RPR8LABHLDR-10
H	Fiches de 7,6 cm	Paquet de 50	RP3CARD-50
	Fiches de 11,4 cm	Paquet de 50	RP4CARD-50
	Fiches de 15,2 cm	Paquet de 50	RP6CARD-50
	Fiches de 34,6 cm	Paquet de 50	RP8CARD-50
I	Kit d'intercalaires de 7,6 cm, 11,4 cm et 15,2 cm	20 intercalaires et 4 paires de supports à fente	SXCASSDIV
	Kit d'intercalaires de 34,6 cm	8 intercalaires et 4 paires de supports à fente	SXBIN8DVR
J	Fiches d'intercalaires de 7,6 cm, 11,4 cm et 15,2 cm	Paquet de 50	RPDIVCARD-50
K	Kit d'étiquettes à cassette*	voir ci-dessous	SXCASLABEL

*Le kit d'étiquettes à cassette comprend: (18) fiches de 7,6 cm, 11,4 cm, 15,2 cm et 34,6 cm; 2 feuilles d'étiquettes (1 feuille de 18 pour tiroirs de 7,6 cm, 11,4 cm et 15,2 cm; 1 feuille de 33 pour tiroirs de 34,6 cm) de chaque couleur et 4 étiquettes de cassette.

Compartimientos del cassette

Artículo	Descripción	Cant.	Pieza N°
F	Compartimiento de acceso SGL de 3"	1	SXRBINSB3
	Compartimiento de acceso SGL de 4 1/2"	1	SXRBINSB4
	Compartimiento de acceso SGL de 6"	1	SXRBINSB6
	Compartimiento de acceso SGL de 8"	1	SXRBINSB8
G	Portaetiqueta de 3"	Paquete de 10	RPR3LABHLDR-10
	Portaetiqueta de 4 1/2"	Paquete de 10	RPR4LABHLDR-10
	Portaetiqueta de 6"	Paquete de 10	RPR6LABHLDR-10
	Portaetiqueta de 8"	Paquete de 10	RPR8LABHLDR-10
H	Tarjeta de 3"	Paquete de 50	RP3CARD-50
	Tarjeta de 4 1/2"	Paquete de 50	RP4CARD-50
	Tarjeta de 6"	Paquete de 50	RP6CARD-50
	Tarjeta de 8"	Paquete de 50	RP8CARD-50
I	Juego de separadores de 3", 4 1/2" y 6"	20 separadores y 4 soportes ranurados	SXCASSDIV
	Juego de separadores de 8"	8 separadores y 4 pares de soportes ranurados	SXBIN8DVR
J	Tarjeta separadora de 3", 4 1/2" y 6"	Paquete de 50	RPDIVCARD-50
K	Juego de etiquetas para cassette*	Véase nota al pie	SXCASLABEL

* El juego de etiquetas incluye lo siguiente: (18) tarjetas de 3", 4 1/2", 6" y 8"; 2 hojas de (1 hoja de 18 etiquetas c/u de 3", 4 1/2" & 6"; 1 hoja de 33 etiquetas de 8"), de cada color y con 4 etiquetas de identificación de cassette.

CLEANING INSTRUCTIONS

Starsys cart bodies and some accessories are constructed of durable advance composite of polymers. A soft cloth, mild soap and water solution can be used to clean lightly soiled surfaces. After cleaning, wipe dry with a clean soft cloth.

For heavily soiled areas, a soft brush and solvent or emulsion-based cleaners may be employed. Always insure that the cleaner is recommended for use on plastics and follow any special instructions from the manufacturer.

The use of abrasive cleaners is **NOT** recommended.

Please read the instructions for recommendations on correct cleaning materials and procedures.

RECOMMENDED TYPES OF CLEANING PRODUCTS:

NOTE: This list is by no means complete. The listed products are only ones that have been proven effective in cleaning the cart body, drawers and accessories. It is not our intention to promote particular brands.

CLEANER BASE	DESCRIPTION	PRODUCT EXAMPLES
Phenol	Liquid detergent, disinfectant, deodorizer	Amphyl
Chlorine	Liquid disinfectant	Bleach
Alkaline	Liquid detergent Liquid detergent	Conquer II Prime
Alcohol	Antiseptic sterilizer	Isopropyl Alcohol
Iodophor	Liquid germicide detergent	Accord
Quaternary Ammonia Compound	Liquid detergent, disinfectant Liquid detergent, disinfectant Liquid detergent, germicide, deodorizer Foam cleaner, disinfectant Liquid detergent, disinfectant	FSD-4 Spartec Micro-Quat Spra-Temp Lysol 256

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

La structure des caddies Starsys et certains accessoires sont réalisés en composites de polymères résistants. Un chiffon doux, imbibé d'une solution savonneuse, peut être utilisé pour nettoyer les surfaces légèrement souillées du clavier. Après nettoyage, essuyer à l'aide d'un chiffon propre et doux.

Pour les surfaces très souillées, on peut utiliser une brosse douce et du solvant ou un produit de nettoyage à émulsion. Toujours veiller à ce que le produit utilisé soit recommandé pour les matériaux plastiques. Observer les instructions spéciales du fabricant.

L'utilisation de nettoyeurs abrasifs n'est **PAS** recommandée.

Prière de lire les instructions sur les recommandations en matière de produits et méthodes de nettoyage.

TYPES DE PRODUITS DE NETTOYAGE RECOMMANDES:

REMARQUE: Cette liste n'est pas exhaustive. Les produits figurant sur cette liste sont les seuls qui se sont avérés efficaces pour le nettoyage du caddie, des tiroirs et des accessoires. Il n'est pas

BASE DU NETTOYANT	DESCRIPTION	EXEMPLES DE PRODUITS
Phénol	Détergent liquide, désinfectant, désodorisant	Amphyl
Chlore	Désinfectant liquide	Eau de Javel
Alcaline	Détergent liquide	Conquer II Prime
Alcool	Stérilisateur antiseptique	Alcool isopropylique
Iodophor	Détergent germicide liquide	Accord
Composé d'ammoniac quaternaire	Détergent liquide, désinfectant Détergent liquide, désinfectant Détergent liquide, germicide, désodorisant Détergent mousse, désinfectant Détergent liquide, désinfectant	FSD-4 Spartec Micro-Quat Spra-Temp Lysol 256

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Las cajas de carros Starsys y algunos accesorios están fabricados con un compuesto de polímeros muy avanzado y duradero. Para limpiar las superficies ligeramente sucias se puede usar un trapo suave y una solución de agua y jabón. Después de limpiar, seque con un trapo suave limpio.

Para áreas muy sucias se puede emplear un cepillo blando y limpiadores disolventes o con base de emulsión. Cerciórese siempre de que el limpiador esté recomendado para ser usado en plásticos y siga todas las instrucciones especiales del fabricante.

NO se recomienda el uso de limpiadores abrasivos.

Lea las instrucciones para ver las recomendaciones sobre los materiales de limpieza y los procedimientos correctos.

TIPOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

NOTA: esta lista no se puede considerar completa. Los productos que aparecen en la misma han demostrado su efectividad en la limpieza de la caja, los cajones y los accesorios del carro. No pretendemos promocionar ninguna marca en particular.

BASE DEL LIMPIADOR	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS DE PRODUCTOS
Fenol	Detegente desinfectante, desodorizante líquido	Amphyl
Cloro	Desinfectante líquido	Lejía
Alcalina	Detegente líquido Detegente líquido	Conquer II Prime
Alcohol	Esterilizante antiséptico	Alcohol isopropílico
Yodofórica	Detegente líquido, germicida	Accord
Compuesto amónico cuaternario	Detegente líquido, desinfectante Detegente líquido, desinfectante Detegente líquido, germicida, desodorizante Limpiador espumoso, desinfectante Detegente líquido, desinfectante	FSD-4 Spartec Micro-Quat Spra-Temp